


Руководство пользователя Ультразвуковая электрическая зубная щетка Mercury T2402

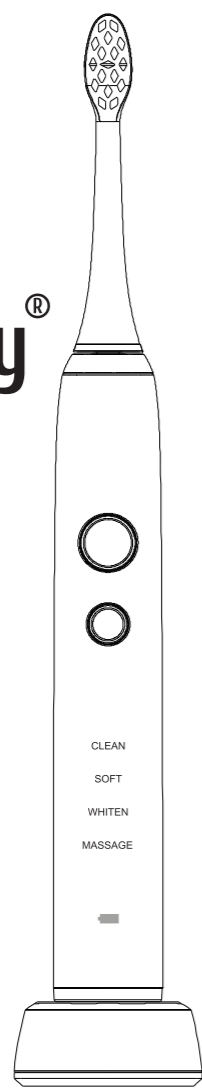

Перед использованием внимательно изучите данное Руководство пользователя.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно изучите Руководство перед использованием данного прибора. Соблюдайте правила техники безопасности, как при работе с любым электрическим устройством.

ОПАСНОСТЬ – ВОДА

Во избежание риска поражения электрическим током:
Не пользуйтесь зарядным устройством в ванной.
Не опускайте зарядное устройство в воду или другую жидкость.
Не устанавливайте и не храните устройство там, где оно может упасть в воду.
Не используйте во время купания.
Не прикасайтесь к зарядному устройству, упавшему в воду. Сначала отключите его от сети.
Не касайтесь вилки мокрыми руками.
Перед чисткой зубов отключите зарядное устройство от сети.

ОПАСНОСТЬ – НАПРЯЖЕНИЕ

Перед подключением прибора проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на этикетке зарядного устройства, напряжению вашей электросети.
1. Сетевой шнур прибора нельзя заменять самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный центр.
Не используйте прибор, если он не работает должным образом, если его уронили или повредили, если он упал в воду. Прекратите использование и обратитесь в специализированный сервисный центр.
2. Не повреждайте, не разрезайте и не модифицируйте сетевой шнур. Не сгибайте, не тяните и не перекручивайте шнур с применением силы. Не ставьте тяжелые предметы на шнур, не допускайте, чтобы шнур был зажат между предметами.
3. Используйте только оригинальное зарядное устройство. Преобразователи напряжения не гарантируют совместимость.
4. Отключите зарядное устройство от сети перед проведением технического обслуживания или очистки.
5. Не используйте зарядное устройство на улице или рядом с горячими поверхностями.

ВНИМАНИЕ

1. Используйте прибор только по назначению, как описано в данной инструкции.
2. Прибор может быть использован детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний только под присмотром, или если они должным образом проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимания опасностей, которые могут возникнуть при его использовании.
Очистка и уход за прибором не должны осуществляться детьми без присмотра.
3. Не позволяйте детям играть с прибором.
4. Не ударяйте, не роняйте прибор.
5. Не пытайтесь извлечь аккумулятор.

-1-

ВНИМАНИЕ

6. Не кладите на зарядное устройство металлические предметы такие как, например, монеты или скрепки.
7. Если зубная паста содержит перексид, питьевую соду или другие бикарбонаты (общепринятые в отбеливающих зубных пастах), тщательно очищайте насадку и рабочую ручку во избежание трещин на пластике.
8. Не мойте прибор в посудомоечной машине.
9. Насадки прибора являются предметами личной гигиены и не попадают под гарантию производителя.
Способы очистки поверхностей прибора, контактирующие с кожей и руками, описаны в разделе «Уход и обслуживание».
10. Если вы испытываете дискомфорт или боль во рту, прекратите использование этого прибора и свяжитесь со стоматологом.
11. Если вам была проведена челюстно-лицевая операция или операция на десны в период последних 2 месяцев, обратитесь к своему стоматологу, прежде чем использовать данный прибор.
12. Зубная щетка была проверена и соответствует стандартам безопасности для электромагнитных приборов. Если у вас есть кардиостимулятор или другой имплантированный прибор, обратитесь к врачу или производителю имплантированного прибора перед использованием зубной щетки.
13. Всегда отключайте прибор после использования.
14. Не используйте прибор в сонном состоянии.

-2-

КОМПЛЕКТАЦИЯ




-3-

ВНИМАНИЕ


Зарядка зубной щетки

Обязательно выключите зубную щетку перед зарядкой. Подключите вилку питания к розетке. Поместите прибор на зарядное устройство. Индикатор заряда будет светиться, указывая, что ручка заряжается. После полной зарядки аккумулятора индикатор зарядки выключится.

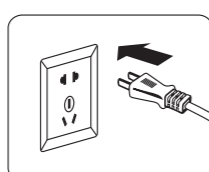

Примечания

- Для полной зарядки аккумулятора требуется не менее 24 часов.
- Прибор должен быть заряжен, если:
 - это первое использование;
 - прибор не используется более трех месяцев;
- Чтобы сохранить аккумулятор полностью заряженным, рекомендуем вам держать зубную щетку на зарядном устройстве, когда она не используется.
- Во время зарядки зубная щетка будет немного нагреваться, это нормальное явление и не должно вызывать беспокойства.
- Со временем продолжительность работы устройства после полной зарядки батареи будет сокращаться. Это означает, что истекает срок службы батареи. Обратитесь в специализированный сервисный центр для замены батареи.

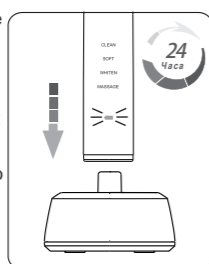

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Нажмите кнопку вкл/выкл. Наденьте насадку на штифт ручки.
Примечание: между цветным кольцом и ручкой будет маленький зазор. (Рис. 1)
- Нанесите щетину и нанесите небольшое количество зубной пасты.
- Прислоните щетку к зубам под небольшим углом к линии десен. (Рис. 2).
- Нажмите кнопку выбора режима и выберите режим.
 - CLEAN: стандартный режим для ежедневной чистки зубов.
 - SOFT: деликатная чистка зубов. Данный режим рекомендован для новичков, а также для пользователей с чувствительными зубами и деснами.
 - WHITEN: отбеливание зубов. Используйте отбеливающую пасту.
 - MASSAGE: для нежного массажа десен.

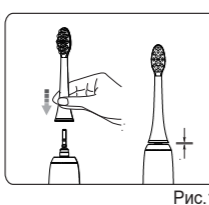


Рис.1

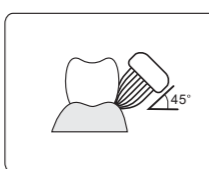


Рис.2

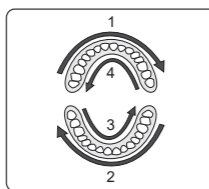


Рис.3

Примечание:
Если во время использования прибора нажать кнопку выбора режима и поменять режим, то запустится 2-минутный цикл нового режима, соответствующий индикатор будет мигать.

-4-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Прислоните щетку к зубам. Слегка надавите, короткими медленными движениями двигайте головку щетки горизонтально вправо и влево по зубам.
- Чтобы эффективность чистки была максимальной, условно разделите рот на 4 секции. Начните с секции 1 и чистите каждую в течение 30 секунд. После каждого интервала в 30 секунд прибор делает паузу, указывая на время перехода к следующей секции. Щетка автоматически выключится через 2 минуты использования. При необходимости включите прибор снова. (Рис. 3).
- Для снятия насадки с ручки необходимо потянуть насадку вверх. (Рис. 4).
- Прополощите щетку и ручку под проточной водой, высушите перед установкой на зарядное устройство. (Рис. 5).
- Установите ручку в зарядное устройство.

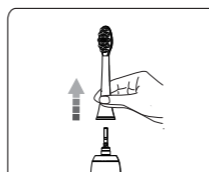


Рис.4




Рис.5

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обязательно выньте вилку из электрической розетки перед чисткой прибора.


Ручка

- Снимите насадку
- Протрите ручку влажной тканью и поместите обратно в зарядное устройство. Не погружайте ручку в воду.
- Протрите ручку влажной тканью и поместите обратно в зарядное устройство.
- Не мойте прибор и его части в посудомоечной машине.

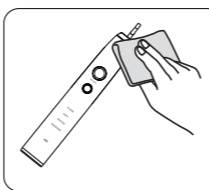

Зарядное устройство

- Используйте мягкую ткань, протрите зарядное устройство.
- Не опускайте зарядное устройство/сетевой шнур/вилку в воду и иную жидкость. Периодически очищайте вилку, чтобы она сохраняла рабочее состояние. Пыль или грязь, которые собираются на вилке, могут привести к поражению электрическим током, перегреву или возгоранию прибора.

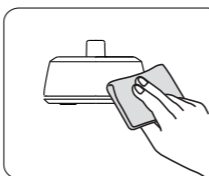

-5-

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Прибор не работает	Вы только что приобрели прибор или он не использовался в течение трех месяцев	Зарядите прибор не менее 24 часов
Слабая или сниженная вибрация	Вы слишком сильно прижимаете щетку к зубам	Снизьте давление щетки на зубы
Прибор работает только короткий период времени	Аккумуляторная батарея закончила свой рабочий цикл	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены батареи
Прибор не работает после полной зарядки	Недостаточное время зарядки	Зарядите прибор не менее 24 часов

ВНИМАНИЕ !

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики прибора, с целью улучшения его свойств, а также изменять комплектацию и цвет прибора без предварительного уведомления потребителей.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, так как электроприбор содержит электрические и электронные компоненты, непригодные для утилизации с бытовым мусором. Сдавая прибор на утилизацию, вы сохраняете природу. Утилизируйте в соответствии с действующим государственным и местным законодательством.



СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Ультразвуковая электрическая зубная щетка Mercury

Модель: T2402
Срок хранения не ограничен

Импортер: ООО «Новгодент Интернешнл»
Адрес: 356236, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 3д 24Г, офис 1
Тел.: +7 (8655) 333-888

По вопросам обращаться в сервисный центр
E-mail: service@novgodent.ru

-6-

ГАРАНТИЯ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики прибора, с целью улучшения его свойств, а также изменять комплектацию и цвет прибора без предварительного уведомления потребителей.

Наименование		Ультразвуковая электрическая зубная щетка Mercury	
Модель	T2402	Серийный номер	
Покупатель	Имя		
	Адрес, телефон		
Дата покупки		Гарантия 1 год с даты покупки	